

Ambu® Man Basic



Caratteristiche e Benefici

- Manichino economico per il training BLS.
- Robusto e duraturo.
- Training realistico della compressione del busto.
- Visualizzazione della profondità di compressione.
- Sistema igienico Ambu per ventilazione bocca a bocca e bocca-naso.
- Può essere usato con maschera facciale per ventilazione.
- Posizionamento di tubi Guedel (quando si usa il pezzo facciale Guedel).
- Resistenza ventilatoria realistica.
- Visualizzazione del corretto volume di ventilazione.
- Movimento visibile del torace durante la ventilazione.
- Torso chiuso anatomicamente corretto.
- Training DEA facile.
- CND: Vo6
- RDM: 1390561
- Materiale privo di lattice di gomma naturale

L'AmbuMan Basic è un manichino training economico che è stato progettato seguendo i requisiti dell'algoritmo BLS.

AmbuMan Basic permette un training ottimale della compressione del torso con una ventilazione realistica. Il sistema igienico unico previene la contaminazione crociata. Permette una ventilazione realistica e un'espirazione attraverso bocca e naso.

La corretta profondità di compressione e il volume di ventilazione richiesto può essere monitorato dall'indicatore sul manichino.

AmbuMan Basic è anche disponibile in pack da 4 pezzi per training di gruppo.

Ventilazione realistica

I discenti percepiranno la resistenza ventilatoria realistica e il torso si alzerà quando la testa sarà correttamente inclinata e l'aria entrerà nel manichino.

AmbuMan Basic permette di guardare, sentire e ascoltare la ventilazione come se fosse reale.

Economico e affidabile


AmbuMan Basic è progettato per essere economico e affidabile per il training BLS.

Training di gruppo

Per facilitare il trasporto AmbuMan Basic è trasportabile in una borsa morbida come manichino singolo o in set da quattro.

Specifiche

Peso torso	6 kg
Lunghezza	70 cm
Profondità	37 cm
Peso 4 Torsi e borsa	30 kg
Max volume di Ventilazione	1200 ml
Max profondità di compressione	7,5 cm

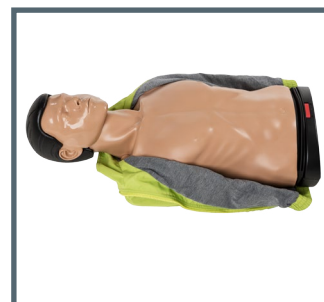

AmbuMan Basic

Materiale

Unità base	ABS (acrilnitrile butadiene stirene)
Testa	Polivinilcloruro, duro
Cute del torso	Polivinilcloruro, morbido
Pezzo Facciale	Polivinilcloruro, morbido
Sacca facciale, monouso	Polietilene
Giacca	Poliestere
Borsa di trasporto	PVC rivestito di nylon



Posizionamento elettrodi DAE

Specifiche per l'ordinazione

Ref.	Descrizione
A268 005 000	AmbuMan Basic incluso di giacca training, borsa di trasporto, 1 pezzo facciale e 25 sacchetti igienici.
A268 006 000	AmbuMan Basic conf. 4 pezzi incluso di giacca training, borsa di trasporto, 4 pezzi facciali e 100 sacchetti igienici.
Accessori	
234 000 702	Ambu sacchetto sistema igienico monouso (Set 100 pz)
234 000 703	Ambu Pezzo facciale (Set 5 pz)
234 000 725	Ambu pezzo facciale Guedel



Indicatore di compressione

Ambu S.r.l

Via Paracelso, 20
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza MB - IT
T +39 039 6578100
F +39 039 6898177
www.ambu.it