


Ambu® IV Trainer

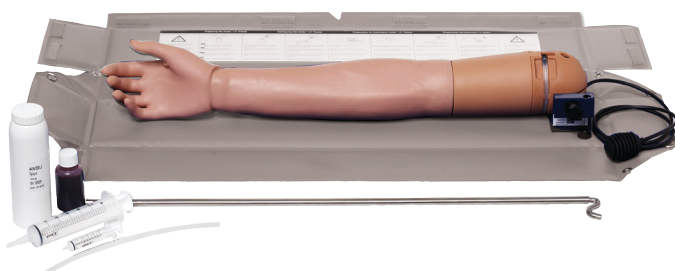

Caratteristiche principali

- Pelle e vene sostituibili
- Braccio rotante e polso mobile
- Pannello indicatore
- Custodia multiuso per il trasporto
- Adatto a tutti i manichini AmbuMan
- Sistema di valvole
- CND: Vo6
- RDM: 69737/R
- Materiale privo di ftalati

Ambu® IV Trainer

Ambu® IV Trainer si utilizza per il training sull'inserimento di cannule e cateteri, l'infusione di liquidi e l'iniezione di farmaci, il prelievo di sangue e la misurazione delle pulsazioni.

Pelle e vene sostituibili

La pelle e le vene sostituibili sono realizzate in lattice naturale, che si contraddistingue da una chiusura del foro dopo la penetrazione, prolungando la durata del braccio.

Polso mobile

Il polso mobile e il braccio rotante assicurano un prodotto per il training completamente realistico, specialmente quando si posiziona un catetere sul dorso della mano.

Pannello indicatore

Il pannello indicatore rappresentante ogni vaso sanguigno fornisce un feedback immediato, ad esempio se un'infusione è stata eseguita correttamente.

Sistema di valvole

Il sistema di valvole riduce la formazione di sacche d'aria nei vasi sanguigni.

Specifiche


Prodotto	Dimensioni
Peso	3 kg
Lunghezza	68 cm
Capacità reservoir	260 ml
Dimensioni borsa di trasporto	75 x 15 x 11 cm

Specifiche per l'ordine

Ref.	Descrizione
255 001 000	Ambu IV Trainer, completo di supporto per l'infusione, tintura rossa concentrata, polvere di talco e siringhe da 5 e 50 ml. Fornito in una custodia da trasporto lavabile.
Accessori	
255 000 704	Tintura rossa concentrata

Materiali


Prodotto	Materiale
Pelle	Latex di gomma naturale
Mano e braccio	PVC, duro
Vene e arterie	Latex di gomma naturale
Indicatore	Silicone
Borsa trasporto	Nylon

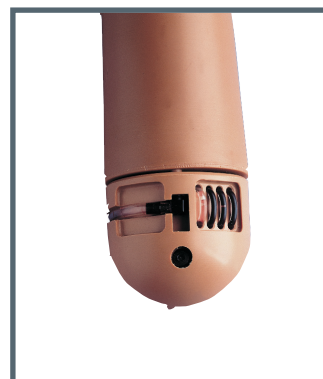

Indicatori di Ambu IV Trainer



Accessori per Ambu IV Trainer

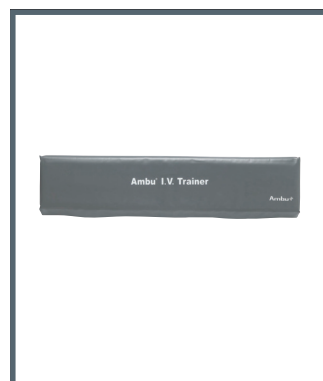

Borsa per il trasporto

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
Tel. +45 7225 2000
Fax +45 7225 2053
www.ambu.com

Ambu A/S
Via Paracelso, 20
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza (MB) - IT
Tel. +39 039 6578100
Fax. +39 039 6898177
www.ambu.it