

IL MONOUSO COME NON L'AVETE MAI VISTO

Ambu® aScope™ 5 Broncho combina la manovrabilità e l'alta qualità di immagine necessari nella sala di pneumologia con la sterilità e l'efficienza dei broncoscopi monouso. Il risultato? Prestazioni costantemente elevate, sterilità e flessibilità richiesta per un flusso di lavoro complesso e impegnativo. È compatibile con l'unità di visualizzazione ed elaborazione di immagini con risoluzione full HD Ambu® aBox™ 2 e può essere facilmente collegato a monitor esterni.




aScope™ 5 Broncho offre prestazioni costantemente elevate con un'eccellente manovrabilità, supportato da una nuova funzione di rotazione e da un design funzionale.

ECCELLENTE MANOVRABILITA'

Accesso alle aree difficili dell'albero bronchiale:

La combinazione degli angoli di curvatura da 195°/195° up and down, l'angolazione della punta distale e la flessibilità della sonda di inserimento consentono di accedere a zone difficilmente raggiungibili dell'albero bronchiale. Noterete l'eccellente manovrabilità, specialmente quando si lavora con uno strumento per endoterapia.

Rotazione 120° destra/sinistra è stato progettato per consentire di regolare la posizione dell'estremità distale in modo da facilitare la navigazione e l'inserimento degli strumenti per l'endoterapia.

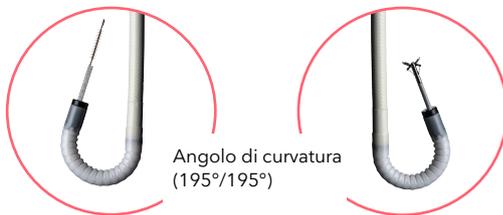

Ambu® aScope™ 5 Broncho

IMMAGINE DI LIVELLO SUPERIORE

Il chip ad alta risoluzione e l'unità di visualizzazione ed elaborazione di immagini full-HD da 12.8" :

aScope 5 Broncho e aBox 2 forniscono una qualità di immagine superiore.

Visione chiara e nitida:

L'elaborazione avanzata delle immagini contribuisce a garantire l'ottimizzazione continua. Il campo visivo di 120°, la profondità di campo da 3-100 mm e il sistema HD con controllo adattivo avanzato automatico offrono un'immagine chiara e nitida necessaria per la procedura.

Maggiore visibilità:

L'algoritmo di ottimizzazione Advanced Red Contrast (ARC) di Ambu ha lo scopo di migliorare la visibilità delle tonalità di rosso nell'immagine senza alterare l'aspetto naturale.

Immagini e video facili da acquisire, rivedere e documentare:

Premendo un pulsante sul broncoscopio è possibile ingrandire e ridurre l'immagine, acquisire immagini e video e rivederli dopo la procedura con i pazienti o i colleghi. Infine, la compatibilità con i server PACS e con il software per la cartella clinica elettronica rende la documentazione semplice ed efficiente.

Codice Articolo	Descrizione	Quantità
621 001 000	aScope 5 Broncho HD 5.0/2.2	5
622 001 000	aScope 5 Broncho HD 5.6/2.8	5
505 001 000EUA2	aBox 2	1

CONTATTACI PER ORGANIZZARE UNA DEMO

Ambu FOREVER FORWARD

Ambu S.r.l.
Via Paracelso 20
20864 Agrate Brianza
Tel.: +39 039 6578100
italia@ambu.com
ambu.it

