

Ambu[®] Open Cuff

Maschera Facciale Monouso



- Flangia preformata
- Cupola trasparente
- Massima adattabilità



Ambu Italia è su LinkedIn
Seguici scannerizzando il codice QR



Ambu® Open Cuff

Ideata per l'uso con rianimatori manuali e automatici, dotata di cupola trasparente per il controllo visivo di emorragie, vomito e respirazione spontanea e realizzata con flangia morbida e preformata per un massimo comfort su adulti e bambini.

Questa è Ambu® Open Cuff.



—
Comfort elevato
per adulti e bambini

La **forma** della maschera facilita l'adattabilità alle diverse tipologie di pazienti, permettendo una ventilazione non invasiva ad alte performance.



—
Flangia morbida in
gomma

La flangia in **TPE** permette una ventilazione efficace senza applicare una pressione eccessiva grazie al materiale che segue le linee anatomiche del viso. Inoltre, la particolare forma della flangia permette una migliore circolazione dell'aria, limitando gli sfiati e aumentando la tenuta.



—
Compatibile con
Risonanza Magnetica



Tutte le maschere Open Cuff sono compatibili per essere utilizzate in ambienti con **Risonanza Magnetica**.





Cupola trasparente e leggera

Corpo maschera trasparente in **polipropilene** leggero e morbido. Permette il corretto posizionamento della maschera e una visione ottimale delle condizioni cliniche.



Misura "zero" per Prematuri

Disponibile la misura #0 dalla forma rotonda e con dimensioni ridotte. Inoltre, la flessibilità del materiale in **silicone** rende questo modello appositamente indicato per neonati e prematuri.



Altre caratteristiche

Codice colore

Le maschere sono differenziate con confezione trasparente e flangia colorata, per una facile identificazione della misura.

8 misure disponibili

Le maschere sono disponibili in 8 misure: dalla #0 per prematuri alla misura #7 Extra-large.

PVC, Latex e Ftalati Free

Le maschere sono formate da flangia in TPE e cupola in Polipropilene con assenza di ftalati, PVC e lattice di gomma naturale.



Ghiera

Le maschere (escluse le misure #0, #1, #2) sono vendute comprensive di ghiera.



Approfitta di Ambu For You!

Insieme per la formazione

| Obiettivo | A chi è rivolto | Modalità |
|---|--|---|
| <p>Divulgare le conoscenze teoriche e tecniche dei device Ambu e ampliare il livello di autonomia e sicurezza nell'uso dei dispositivi</p> | <p>Al personale che già utilizza i nostri dispositivi e agli operatori interessati a conoscere tutte le soluzioni Ambu</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Hospital Meeting • Training personalizzato |

Come organizzarlo

È facile e veloce. Tramite il nostro **responsabile di zona**, oppure contattando marketingitalia@ambu.com o scansionando il QR Code.




Nota bene

Ricordiamo che la nostra presenza è solo e unicamente indirizzata alla spiegazione dei nostri dispositivi. La decisione di utilizzarli o meno è sempre a discrezione del medico, responsabile del paziente; il personale Ambu può solo illustrare le peculiarità dei presidi senza interagire in alcun modo con il paziente. Ambu For You non è un corso con crediti ECM.

Specifiche per l'ordine

| Codice Articolo | Misura | Qtà Scatola | a | b |
|-----------------|-------------------|-------------|-------|--------|
| 306 0000 00 | #0 Prematuro | 20 | 43 mm | 43 mm |
| 306 1000 00 | #1 Neonato | 20 | 54 mm | 81 mm |
| 306 2000 00 | #2 Bebè | 20 | 61 mm | 91 mm |
| 306 3000 00 | #3 Bambino | 50 | 70 mm | 103 mm |
| 306 4000 00 | #4 Adulto Piccola | 50 | 84 mm | 111 mm |
| 306 5000 00 | #5 Adulto Media | 50 | 87 mm | 125 mm |
| 306 6000 00 | #6 Adulto Grande | 50 | 94 mm | 135 mm |
| 306 7000 00 | #7 Extra Large | 50 | 98 mm | 141 mm |

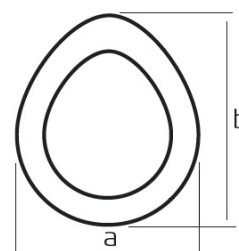

Richiedi subito una prova

