

SCHEMA TECNICA

VivaSight 2 DLT è un tubo endobronchiale sterile monouso a doppio lume, destinato all'isolamento del polmone destro o sinistro di un paziente per la ventilazione monopulmonare e alla verifica del posizionamento e del riposizionamento del tubo.

VivaSight 2 DLT è simile nel design ai tubi a doppio lume convenzionali, ma è dotato di una videocamera integrata che si collega a un'unità di visualizzazione Ambu, consentendo di monitorare il posizionamento del tubo in tempo reale.

Aumenta la protezione del paziente grazie alla visualizzazione continua

VivaSight 2 DLT aumenta la protezione del paziente perché permette di seguire il posizionamento del tubo e di rilevare e correggere gli errori di posizionamento.

Migliora il flusso di lavoro della procedura

La visualizzazione continua può migliorare la gestione del paziente e il flusso di lavoro della procedura perché:

- Accelera i tempi di intubazione rispetto ai DLT convenzionali.
- Favorisce il corretto posizionamento del tubo.
- Riduce in modo significativo l'uso del broncoscopio.
- Permette di rilevare e correggere subito lo spostamento del tubo.

Una alternativa economica per la OLV*

Secondo uno studio economico-sanitario basato su un trial controllato randomizzato, la VivaSight 2 DLT offre un'alternativa economicamente vantaggiosa per la OLV. Lo studio ha confrontato i costi e gli effetti di un DLT convenzionale utilizzato in combinazione con un broncoscopio pluriuso con il solo DLT con videocamera integrata.


Il portfolio OLV completo Ambu include Ambu VivaSight 2 DLT e Ambu® VivaSight™ 2 SLT con videocamera integrata, Ambu® VivaSight™ Endobronchial Blocker Tube e il broncoscopio monouso Ambu® aScope™ 4 Broncho Slim.

VivaSight 2 DLT può essere connesso al monitor full-HD Ambu aView 2 Advance, per un'immagine di alta qualità e una visione doppia/Dual View.

*Larsen et al. A Cost-Effectiveness Analysis Comparing the VivaSight Double-Lumen Tube to a Conventional Double-Lumen Tube in Adult Patients Undergoing Thoracic Surgery Involving One-Lung Ventilation. 2019 PharmacoEconomics Open.

Ambu® VivaSight™ 2 DLT

La seconda generazione di tubi a doppio lume Ambu per la ventilazione monopulmonare

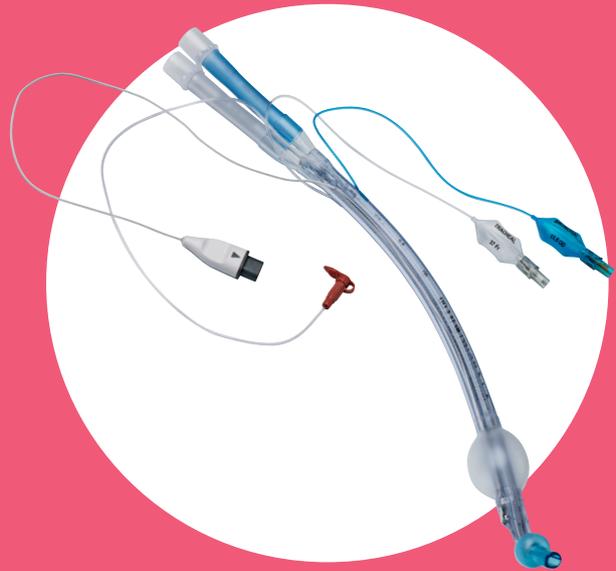

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Aumenta la protezione del paziente

Migliora il flusso di lavoro della procedura

Alternativa economica per la ventilazione monopulmonare (OLV)

Riduce in modo significativo l'uso del broncoscopio

Compatibile con Ambu® aView™ 2 Advance

Ambu

SPECIFICHE TECNICHE

Ambu® VivaSight™ 2 DLT	35 Fr Left	37 Fr Left	39 Fr Left	41 Fr Left
Misura	35 Fr	37 Fr	39 Fr	41 Fr
DI - Diametro Bronchiale interno effettivo (mm)	4.4	4.6	4.8	5.0
DI - Diametro Tracheale interno effettivo (mm)	4.4	4.6	4.8	5.0
DE (mm- bronchiale)	10.5	11.0	11.5	12.0
Lunghezza (±10 mm)	330	330	330	330

Generale

Uso: Dispositivo monouso

Confezione: Confezionato singolarmente, sterilizzato con metodo ETO

Durata a magazzino: 36 mesi

Stoccaggio: conservare a temperature comprese tra 10 °C e 25 °C in un luogo asciutto e al riparo dalla luce

Materiali

Tubo: PVC per uso clinico; porta di iniezione aggiuntiva per la pulizia dell'ottica della videocamera

Cuffia: PVC per uso clinico, alto volume, bassa pressione

Durezza del tubo: 85 (Shore A)

Il prodotto non è realizzato con ftalati

VivaSight 2 DLT Kit include	Quantità
VivaSight 2 DLT con connettore a Y	1
Ambu® VivaSight™ Catetere di aspirazione curvo 10 Fr	2
VivaSight 2 Cavo adattatore	1

Videocamera

Sensore di immagini: CMOS

Sorgente luminosa

LED: 2 led bianchi

SPECIFICHE D'ORDINE

Ambu® VivaSight™ 2 DLT Kit	Codice prodotto	Quantità/box
Ambu® VivaSight 2 DLT Kit 35 Fr - LEFT	412351000	5
Ambu® VivaSight 2 DLT Kit 37 Fr - LEFT	412371000	5
Ambu® VivaSight 2 DLT Kit 39 Fr - LEFT	412391000	5
Ambu® VivaSight 2 DLT Kit 41 Fr - LEFT	412411000	5

Monitor	Codice prodotto	Quantità/box
Ambu® aView™ 2 Advance Monitor	405011000*	1

*Il numero di articolo dei monitor è diverso per ogni paese. Si prega di contattare il rappresentante locale per conoscere il numero corretto nel proprio paese.

Configurazione 405011000EUA1: Blu-Blu-Grigio

Configurazione 405011000EUA2: Verde-Blu-Grigio



Ambu® VivaSight™ 2 DLT.



Ambu® VivaSight™ 2 DLT connesso al monitor Ambu® aView™ 2 Advance.

Ambu

Ambu A/S
 Baltorpbakken 13
 2750 Ballerup
 Denmark
 T +45 72 25 20 00
 F +45 72 25 20 50
 ambu.com

Ambu srl
 Via Paracelso 20
 20864 Agrate Brianza
 Italia
 Tel +39 039 6578100
 Fax +39 039 6898177
 ambu.it

Rx ONLY

